

La thérapie de l'avenir

Aquatone & Triomed Compact

Dr. Boris Aranovich



Introduction

Les gens utilisent de nombreuses méthodes pour se guérir, mais généralement sans atteindre les résultats souhaités. Afin de savoir comment améliorer au mieux votre santé, vous devez comprendre que le corps doit être traité à trois niveaux différents :



Dr. Boris Aranovich

Niveau 1: Vous travaillez avec le corps physique, y compris l'exercice physique, l'exercice de respiration, les vitamines, les minéraux et d'autres suppléments.

Niveau 2: Vous travaillez avec la structure énergétique du corps, qui est étroitement liée à la structure biochimique du corps qu'elle contrôle également. Ce type de travail est plus étendu et peut affecter un certain nombre de systèmes corporels simultanément. Des exemples de ce type de travail du corps sont l'acupuncture et les traitements Aquatone et Triomed. Les traitements Aquatone et Triomed sont des méthodes très avancées basées sur la recherche en physique quantique, et tout en étant très efficaces, ils sont également faciles à utiliser - aucune connaissance préalable n'est requise.

Niveau 3: Travailler avec le système d'information du corps. L'information gouverne tous les processus corporels, à la fois biochimiques et énergétiques. Et c'est le plus haut niveau. Notre information gouvernante provient de trois sources différentes: nos pensées, les informations de la société et les informations de nos gènes. Vos pensées finiront par affecter votre biochimie. Si une autorité vous a dit que vous avez une maladie incurable, alors vous risquez de l'attirer. Nos gènes transmettent également des informations susceptibles de nous affecter. Et la recherche de pointe conclut que nous sommes en mesure d'influer sur l'influence des gènes avec nos pensées.


Travailler au niveau 1 peut être utile si le problème de santé est léger et peut également aider à prévenir certains problèmes de santé. Travailler au niveau 2 est beaucoup plus bénéfique. En particulier, en utilisant L'Aquatone et le Triomed, car ces méthodes améliorent une multitude de fonctions corporelles et sont capables de restaurer naturellement le pouvoir de guérison inné du corps. Ces outils de santé sont également capables d'affecter positivement notre psychisme, nous permettant d'avoir des pensées plus heureuses avec plus de facilité.

Mais parfois, les personnes ayant des problèmes de santé prolongés ont stocké des modèles de problèmes dans le subconscient, qui contrôle le corps. Ainsi, en travaillant sur vous-même en faisant tous les traitements, pas grand chose va s'améliorer car la personne ne croit pas dans son subconscient dans le rétablissement. Il n'y a qu'une chose à faire: éliminer les schémas du subconscient ou, comme on l'appelle aussi, «les connexions neuro- synaptiques». Mais ceci demande un autre type de travail.

Les sources de problèmes de santé


L'image ci-dessous montre que tous les problèmes sont causés par différents types de stress, que ce soit de l'anxiété, des inquiétudes ou des situations stressantes. Le stress provoque une tension dans les organes internes, ce qui est le début de la stagnation. Et là où il y a stagnation, que ce soit dans les intestins ou dans le foie, des micro-organismes vont se développer. Le corps tente alors de combattre les micro-organismes en déclenchant des processus inflammatoires ou en créant des tumeurs pour limiter les dommages - ce qui est la façon de survivre de l'organisme. La chose importante que l'Aquatone fait pour le corps est de réduire les stagnations et aide ainsi le corps à reprendre des forces pour qu'il puisse se soigner plus facilement.

Le vieillissement et les diverses tensions dans la vie peuvent altérer l'ordre et l'harmonie dans le système vibrationnel, ce qui peut causer des problèmes dans le corps. Aujourd'hui, la science a réussi à trouver les fréquences de résonance de l'eau et a créé un dispositif qui peut produire ces vibrations - l'Aquatone. En restaurant naturellement la structure de l'eau dans le corps, tous les processus biochimiques sont améliorés, ce qui augmente considérablement le pouvoir de guérison du corps.

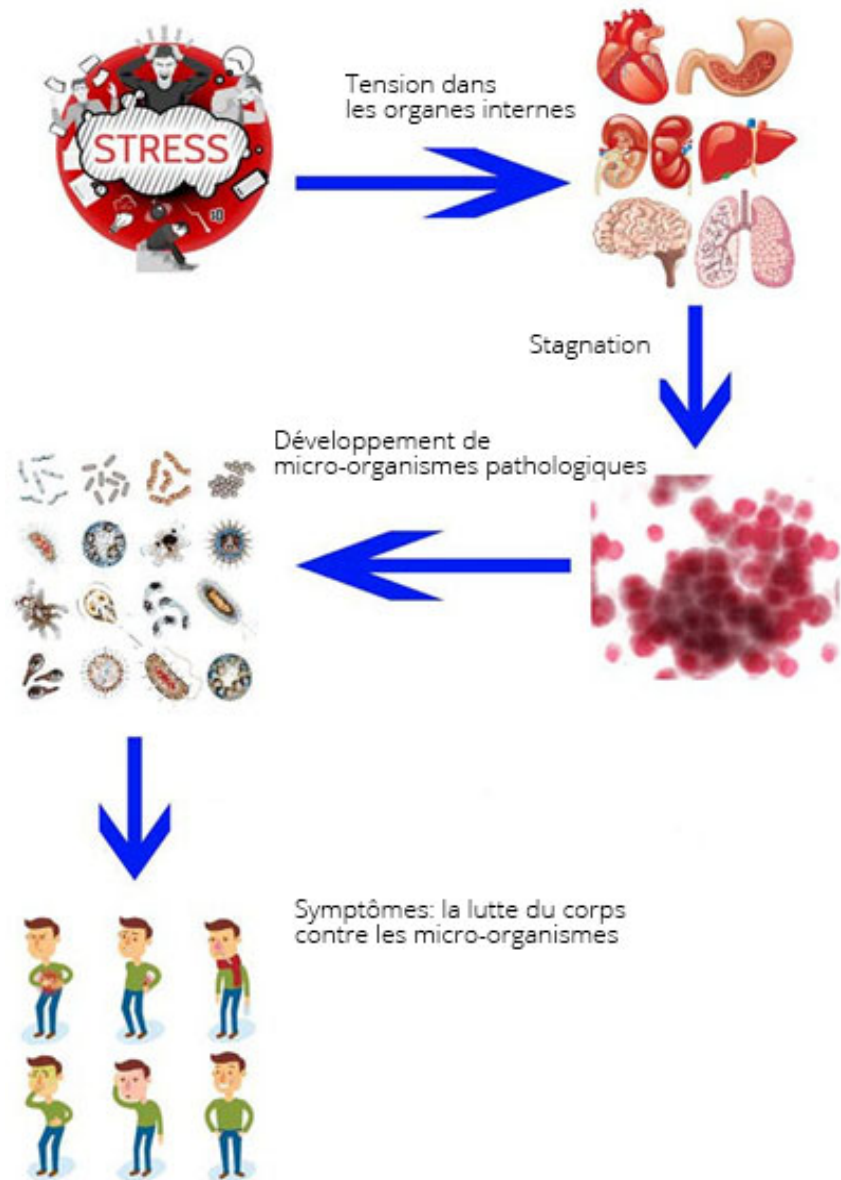

L'environnement interne du corps

Notre corps est constitué de cellules. Tous les organes, les parties du corps, le sang et la lymphe sont des cellules - travaillant, créant de l'énergie, remplissant leurs fonctions. Et tout ce travail, toutes les réactions biochimiques se déroulent dans l'environnement interne du corps qui consiste en 70-80% d'eau. La photo montre combien d'eau contiennent divers organes. Chaque problème de santé, maladie et processus de vieillissement est toujours le résultat d'un environnement interne malsain - que ce soit en raison de la contamination, de la structure affaiblie ou de la diminution du débit dans les liquides. Si nous pouvons améliorer l'environnement interne du corps, nous avons trouvé une méthode universellement applicable pour recréer la santé.

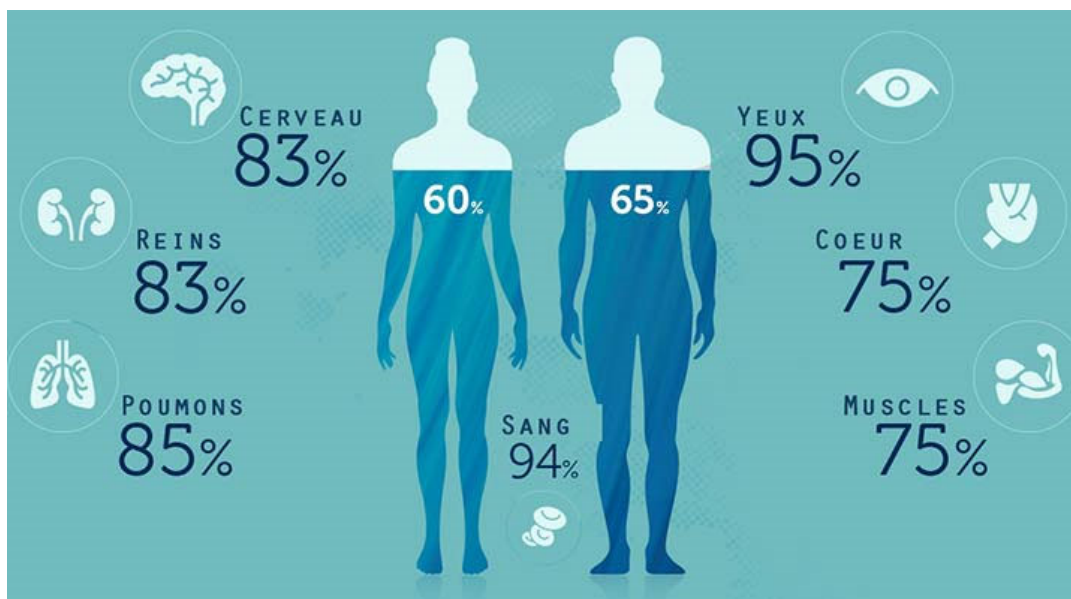

L'Aquatone est une solution très pratique capable de restaurer la santé grâce à une nouvelle technologie innovante. Cette technologie permet à l'individu de traiter facilement une multitude de problèmes de santé, elle est également incroyablement efficace et très facile à utiliser à la maison. Quand un appareil Aquatone émet ses ondes électro-magnétiques ultra-faibles, les ondes améliorent l'équilibre dans les fluides corporels, restaurant ainsi entièrement ou partiellement les fluides dans le corps. Les fluides corporels exposés à l'Aquatone réagissent sur l'appareil comme s'il s'agissait d'un diapason.

En rétablissant la structure informationnelle du corps (sang, lymphe, fluides intra- et extra-cellulaires), les processus biochimiques du corps sont renforcés, y compris les processus anti-inflammatoires. Pour plus d'informations sur l'Aquatone, rendez-vous sur: www.aquatone.se et www.mr-ab.se.

Un autre appareil très pratique est le Triomed, qui émet des ondes électro-magnétiques ultra-faibles étroitement liées aux ondes électromagnétiques du corps. Le Triomed fonctionne comme un diapason pour les connexions informationnelles entre les cellules. En rétablissant ces connexions, le corps est capable d'éveiller sa capacité innée à se guérir. Le Triomed fonctionne également comme un diapason pour les membranes cellulaires, qui retrouvent en tout ou en partie leur capacité à absorber l'oxygène et les nutriments.

Ces deux appareils, le Triomed et l'Aquatone, se complètent parfaitement. Le Triomed aide les cellules à augmenter l'énergie et améliore la communication cellulaire et l'Aquatone améliore l'environnement aquatique dans le corps, ce qui améliore l'efficacité de la communication des cellules et aide les cellules à s'engager dans des processus biochimiques.

Modes et niveaux de l'Aquatone

Tous les modes ont la même fréquence de résonance et rétablissent l'état normal de l'eau du corps. Immédiatement après la mise en place de l'appareil sur un organe ou une partie du corps, l'eau de cet organe ou de cette partie du corps sera restructurée dans son état d'origine. Et c'est précisément ce qui rend l'Aquatone si unique - l'eau restructurée améliore les réactions biochimiques et permet au système immunitaire de fonctionner plus efficacement.

Afin de maximiser l'efficacité, les différents modes ont été créés. Cela signifie que les fréquences de résonance atteignent le corps avec des vitesses différentes - elles oscillent vers l'avant, plus lentement ou plus rapidement en fonction du problème de santé ou de l'organe. Avec plus de résonance, le statut s'améliorera toujours, il est donc impossible de faire du mal. C'est juste une question de traitement plus ou moins efficace.


Les modes recommandés sont basés sur les expériences faites dans diverses cliniques et hôpitaux. Il est toujours bénéfique d'essayer par vous-même et d'alterner entre les modes car nous sommes tous des individus dans des conditions variables. Il existe cependant des recommandations générales qui conviennent à tous:

Le Mode 2 est plus adapté aux tissus mous et aux organes internes.

Le Mode 3 est recommandé pour les articulations et la colonne vertébrale, Mode 1-3, Mode 2-3 et Mode 2 sont pour le cerveau. Utilisez toujours le Mode 1 en cas d'urgence ou de situation aiguë.

Concernant les niveaux, c'est facile: niveau 1 pour les enfants et les animaux. Pour les adultes, initialement quelques mois, niveau 2 et ensuite niveau 3.

Cependant, il est bénéfique de tester ce qui se sent le mieux - par exemple, il pourrait être mieux pour les personnes âgées de rester au niveau 2 tout le temps.

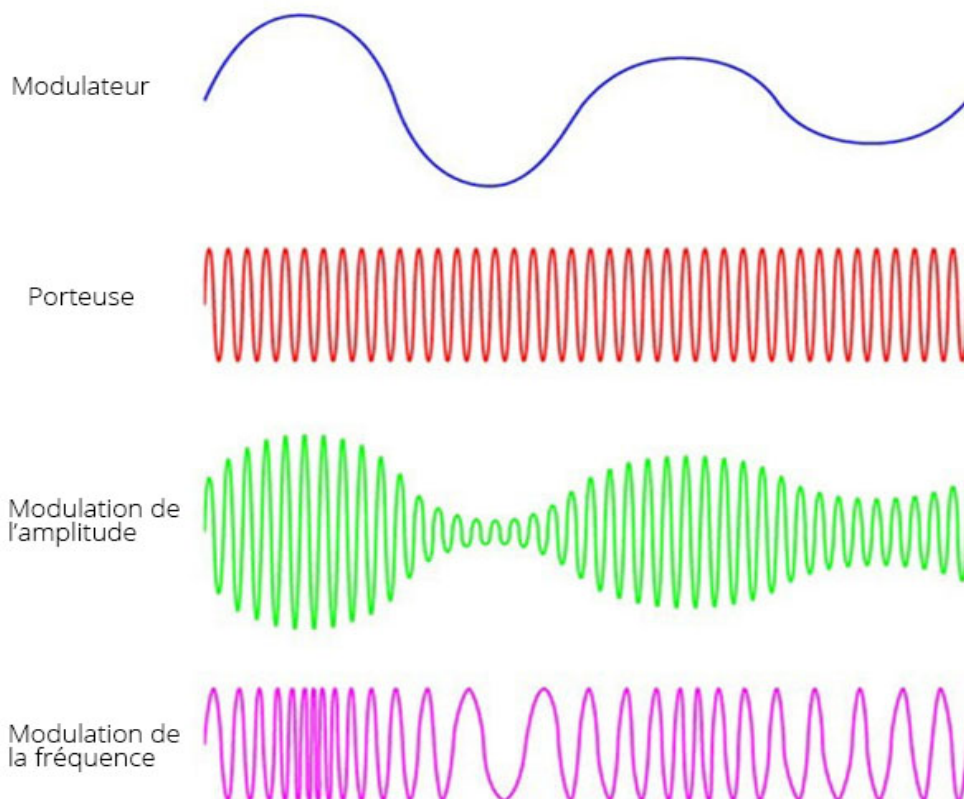

Le rôle de l'Aquatone et du Triomed dans le traitement des problèmes de santé, le rajeunissement et la cosmétologie

Traiter les problèmes de santé avec l'Aquatone et le Triomed consiste toujours en un traitement général et un traitement local. Afin de maintenir une bonne santé, un traitement prophylactique est fortement recommandé et devrait être effectué avec des traitements généraux et le nettoyage du foie, des reins et du système lymphatique. Le nettoyage doit être fait une semaine par organe et trois fois par an. La durée de traitement recommandée est de 1 à 1,5 heures par jour. Afin de soutenir le corps dans l'assimilation des traitements, nous recommandons également un temps d'au moins 30 minutes après avoir complété un traitement Aquatone de 20 minutes et un traitement Triomed de 30 minutes.

Traitement général de divers problèmes de santé

Les problèmes de santé sont le résultat de déséquilibres dans les mécanismes d'autorégulation du corps où les composants principaux sont le cerveau, le système nerveux et le système hormonal. Le stress à long terme tel que l'anxiété, les soucis, les inquiétudes, la tristesse, la dépression, etc. peuvent causer des déséquilibres dans le cerveau qui à leur tour provoquent des déséquilibres dans le système nerveux et le système hormonal. Les déséquilibres du système nerveux entraînent souvent des tensions dans les organes internes et les parties du corps, ce qui crée des stagnations. Et c'est dans ces stagnations que se développent les micro-organismes, provoquant le corps à les combattre par des inflammations et autres troubles. Les déséquilibres du système nerveux peuvent également affecter le système immunitaire, ce qui peut entraîner des allergies, des maladies auto-immunes, des inflammations ou des tumeurs. Les déséquilibres du système hormonal entraînent de nombreux autres problèmes, tels qu'une mauvaise absorption de vitamines et de minéraux, des problèmes psychologiques et un certain nombre d'autres effets qui se détériorent sur l'organisme entier. C'est pourquoi il est si important avec un traitement correct, c'est-à-dire incluant des traitements qui améliorent ou restaurent les mécanismes autorégulateurs.

- en particulier si le problème est chronique. La science de la physique quantique moderne a réussi à découvrir le lien entre la physiologie du corps et les vibrations du corps. Et aujourd'hui, nous avons la capacité de changer la physiologie en affectant les vibrations du corps. Les deux dispositifs, l'Aquatone et le Triomed, qui émettent tous deux des vibrations ultra-faibles et similaires au corps, sont les méthodes les plus efficaces actuellement en place pour améliorer les mécanismes de régulation du corps. L'efficacité des dispositifs vient de leur capacité à améliorer l'environnement du corps - fluides, sang, lymphe, membranes cellulaires et communication cellulaire - ce qui est primordial pour la capacité des mécanismes d'autorégulation à fonctionner correctement. Certaines personnes souffrent de plus d'un problème de santé, ce qui est la preuve d'une mauvaise régulation corporelle - sans avoir d'abord amélioré la régulation, le rétablissement de la santé est presque impossible. Les symptômes ne peuvent être améliorés que temporairement. Travailler avec des mécanismes autorégulateurs est également nécessaire à des fins prophylactiques. Vous trouverez ci-après quelques suggestions pour améliorer les mécanismes d'autorégulation avec l'aide de l'Aquatone et du Triomed.

1. Améliorer les fonctions du cerveau ::

Triomed: traiter les points d'acupression VG 20 pendant 2 minutes et VG 16 pendant 2 minutes. Voir l'image. Avec le programme Triomed Compact 1, deux fois par semaine.

Aquatone: traiter l'arrière de la tête pendant 10 minutes et le front pendant 10 minutes avec le mode 3, niveau 2, trois fois par semaine.

2. Améliorer le système nerveux:

Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour, tous les jours. Traitez les points VG 14 pendant 5 minutes, voir photo, avec le programme 1 du Triomed Compact, trois fois par semaine.

Aquatone: Traitez le plexus solaire 10 minutes deux fois par jour avec le mode 2, niveau 2. Cinq fois par semaine.

3. Améliorer le système hormonal:


Triomed: Traiter les points R1 pendant 10 minutes et RP6 pendant 10 minutes. Voir l'image. Avec Triomed Compact, utilisez le programme 1. Trois fois par semaine.

Aquatone: Traitez la zone sous le nombril pendant 10 minutes avec le mode 2, niveau 2, trois fois par semaine et traitez les reins et les glandes surrénales sur chaque zone pendant 10 minutes avec le mode 2, niveau 2, trois fois par semaine.

En outre, lors du traitement des mécanismes d'autorégulation, vous pouvez placer l'Aquatone directement sur les oreilles, car les oreilles couvrent toutes les zones réflexes actives du corps: 10 minutes sur chaque oreille avec Mode 2-3, Niveau 2. Deux fois par semaine.

Je voudrais souligner que ce sont des traitements pour améliorer les mécanismes d'autorégulation. Durant la journée, vous pouvez ajouter des traitements pour des problèmes spécifiques.

Les zones générales renforcent tout le corps

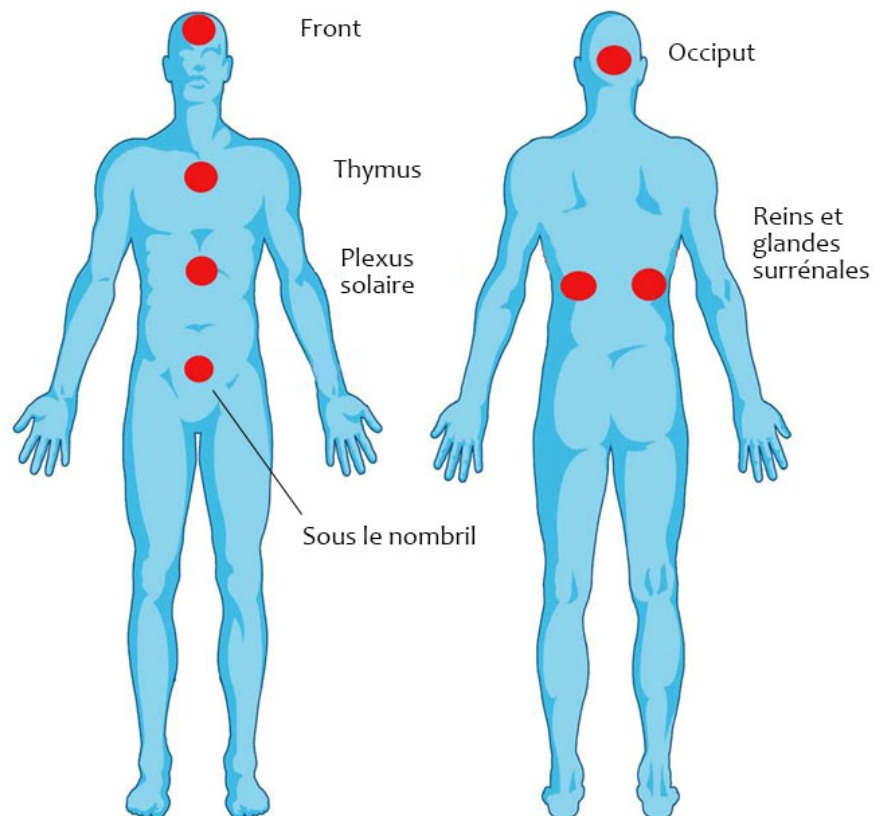


Il est recommandé d'utiliser le Mode 3 ou Mode 2-3 sur la tête, en cas de dépression le Mode 1-2

Dix points pour l'équilibrage général du corps

Méridien du colon


GI-4

Le creux entre le pouce et l'index

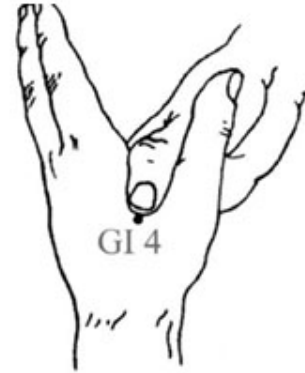

GI-11

A l'extrémité du pli du coude

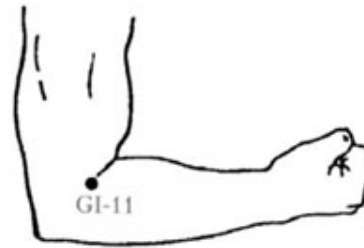

Méridien de l'estomac

E-36


3 Chon sous le bord inférieur de la patella et 1 Chon du à partir du bout du tibia, sur l'extérieur de la jambe



Méridien des reins

R-1

Dans le creux au milieu du pied

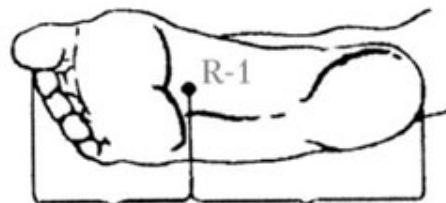

Méridien de la rate

RP-6

Derrière le tibia, 3 Chon au-dessus du milieu de la cheville intérieure, sur le muscle




Vaisseau gouverneur

VG-20

Sur la ligne centrale, 7 Chon au-dessus de la ligne de la chevelure arrière ou 5 Chon derrière le début de la chevelure

VG-20

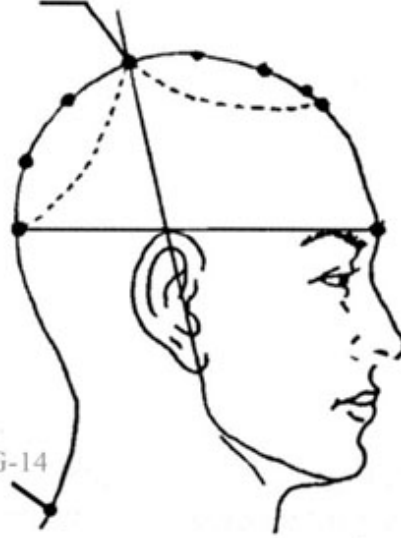


-VG-14

Sous la 7e vertèbre (la plus prominente), entre la 7e cervicale et la première vertèbre thoracique

VG-14

Méridien du coeur

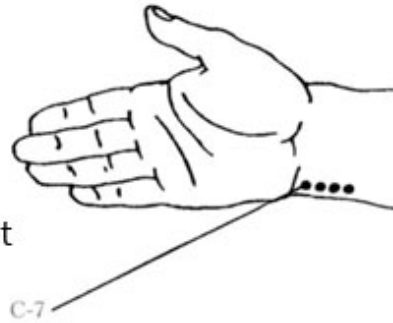


Dans le creux du pli du poignet

Vaisseau conception

VC-17

Sur la ligne centrale, sous le creux de la gorge, le sternum, dans le creux

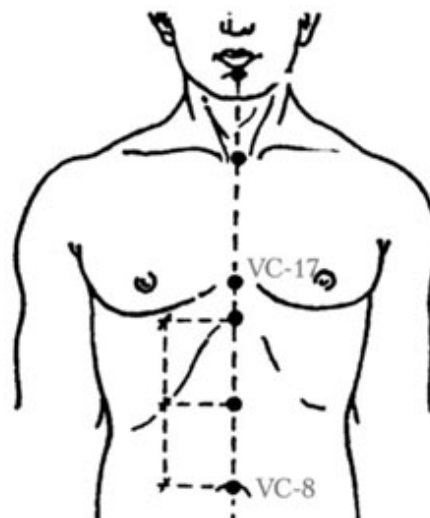

VC-8

Au centre du nombril

Traitements avec l'Aquatone et le Triomed pour les processus inflammatoires dans les organes internes et les tissus (intestins, estomac, reins, muscles, etc.)

Dans ces cas, le corps essaie de se débarrasser des micro-organismes en créant des processus inflammatoires. L'Aquatone aide le corps en améliorant le sang, la lymphe et l'eau dans la zone à problème, améliorant ainsi l'accès du système immunitaire aux micro-organismes et en aidant à éliminer les micro-organismes mortels via la lymphe. Et le Triomed, qui améliore les membranes cellulaires, renforce les cellules du système immunitaire.

Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour. Placez l'appareil sur la zone du problème: programme "Universel" 10 minutes, deux fois par jour.

Aquatone: Placez l'appareil sur la zone du problème deux fois par jour, alternez entre les modes 2 et 3.

Traitement avec l'Aquatone et le Triomed pour les processus inflammatoires dans les articulations et la colonne vertébrale

Ici, l'Aquatone est utilisé de la même manière que pour les problèmes dans les organes internes et les tissus, mais dans ce cas l'Aquatone réduit également la tension dans les muscles autour des articulations et des vertèbres et améliore la circulation sanguine. Le Triomed renforce les cellules du système immunitaire et aide les muscles à se détendre.

Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour. Placez l'appareil sur la zone du problème: utilisez le programme "Universal" 10 minutes deux fois par jour.

Aquatone: Placez l'appareil sur la zone du problème deux fois par jour, mode 3.

Traitement avec l'Aquatone et le Triomed pour les fibromes, adénome, tumeur bénigne

Lorsque le corps crée des tumeurs, c'est parce qu'il veut limiter la prolifération des micro-organismes. Les tumeurs, comme les inflammations, sont le résultat de stagnations mais aussi de déséquilibres hormonaux. Dans ces cas, l'Aquatone réduit ou élimine les stagnations, et le Triomed - en renforçant le système nerveux - équilibre le système hormonal et renforce le système immunitaire.


Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour. Placez l'appareil sur la zone du problème, utilisez le programme "Universal" 15 minutes une fois par jour.

Aquatone: Placez l'appareil sur la zone du problème, deux fois par jour avec le mode 2.


Traitement avec l'Aquatone et le Triomed pour des problèmes psycho-émotionnels

L'Aquatone et le Triomed peuvent être utiles pour les problèmes psycho-émotionnels car ils améliorent la production de neurotransmetteurs importants tels que la dopamine, la sérotonine et les endorphines, qui affectent le statut psycho-émotionnel. L'Aquatone améliore l'environnement dans le cerveau et les intestins et aide ainsi les cellules à produire plus de neurotransmetteurs. Le Triomed augmente l'énergie des cellules de sorte qu'ils sont capables d'augmenter la production de neurotransmetteurs et augmente également la sensibilité des récepteurs des cellules dans le corps entier, facilitant l'amélioration de la réception des neurotransmetteurs.


Traitement avec l'Aquatone et le Triomed dans les processus inflammatoires des tissus et organes internes (intestins, estomac, rein, muscles, etc.)

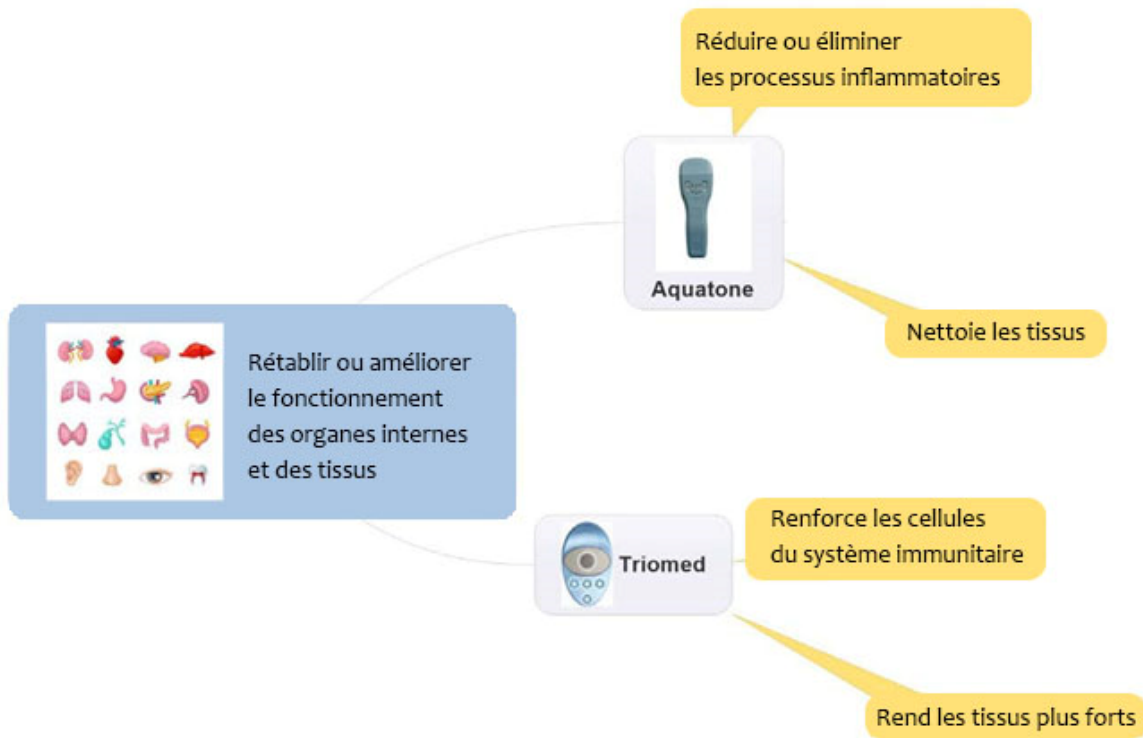


Traitement avec l'Aquatone et le Triomed dans les processus inflammatoires des articulations et de la colonne vertébrale

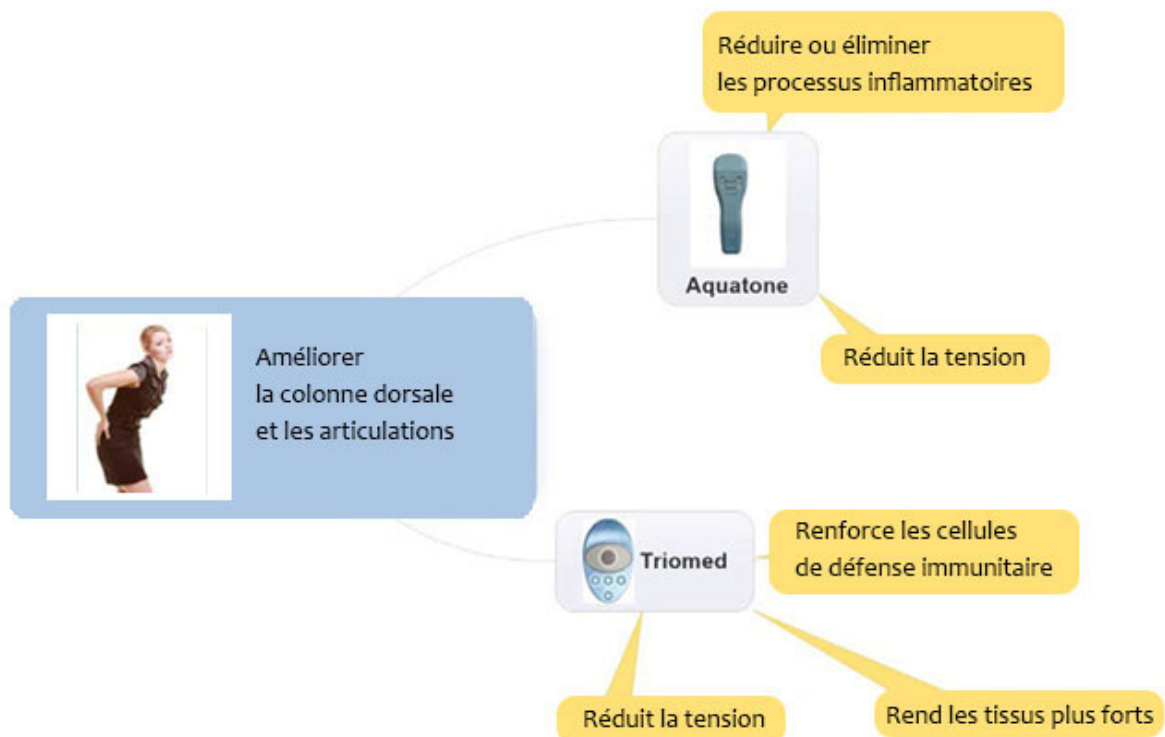

Traiter les désordres émotionnels

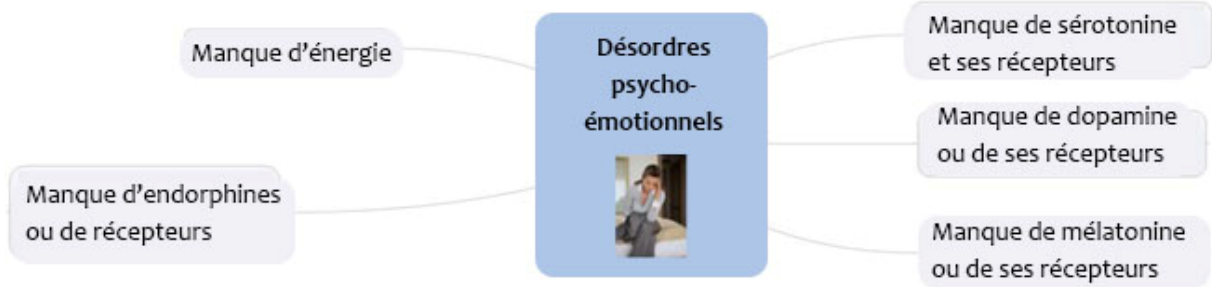

Améliorer les capacités mentales

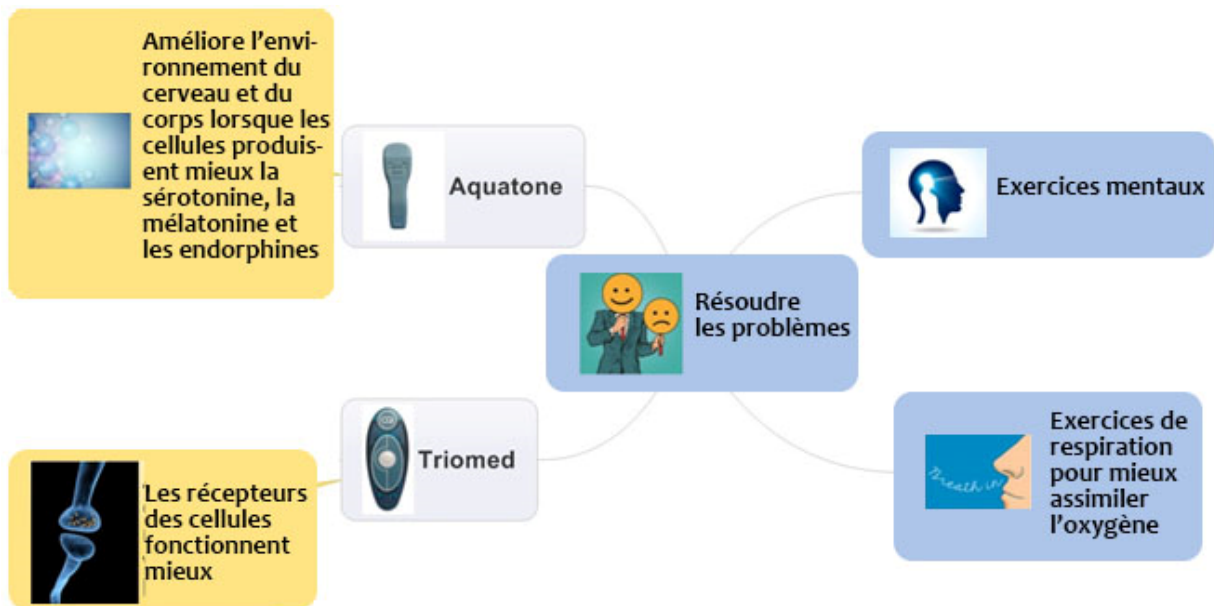

Triomed: utiliser le programme "Harmony" deux fois par jour, point VG 20, pict. 6 - programme "Universal" une fois par jour.


Aquatone: Occiput deux fois par jour, le matin Mode 1-2, le soir Mode 3 ou Mode 2-3. Front: une fois par jour avec le mode 3.

Traitement avec l'Aquatone et le Triomed pour une clarté mentale

La clarté mentale dépend de la santé des cellules du cerveau, de la qualité de la circulation sanguine dans le cerveau et du bon fonctionnement de la communication entre les cellules. L'image montre comment vous pouvez créer une clarté mentale et une bonne mémoire avec l'aide de l'Aquatone et du Triomed.

Triomed: Utilisez le programme "Harmony" deux fois par jour, point VG 20, pict. 6 et programme "Universal" deux fois par jour, 2 minutes à la fois.

Aquatone: Occiput deux fois par jour, Mode 1-2. Front: une fois par jour avec le mode 1-2.

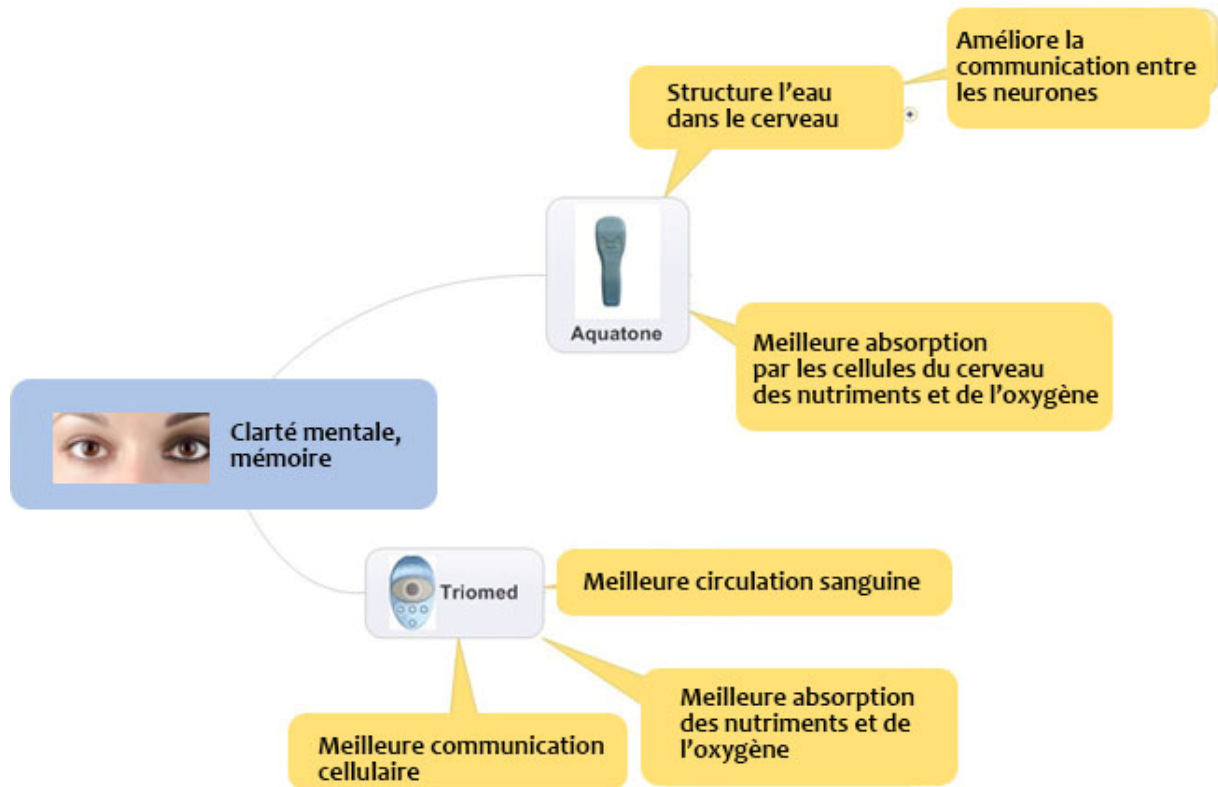


Detoxification du corps

Vous détoxifier le corps en trois étapes - le foie, les reins et le système lymphatique. Le nettoyage optimal est fait avec l'aide de l'Aquatone; les images montrent comment vous allez à ce sujet. Le Triomed aide également le processus de détoxification en renforçant les membranes cellulaires.

La beauté est intérieure


La beauté équivaut à la santé - la vraie beauté est impossible sans une bonne santé. Pourquoi la peau devient sèche, ridée et inégale? Principalement parce que les mécanismes de désintoxication corporelle - le système lymphatique, les reins et le foie - ne fonctionnent pas correctement. Il a aussi à voir avec un statut faible des fibroblastes, qui sont les cellules productrices de collagène. Les fibroblastes revigorent la peau et la rendent élastique et l'acide hyaluronique maintient l'hydratation de la peau. Au fur et à mesure que le vieillissement se produit, la stagnation dans le corps augmente et les mécanismes de détoxification se détériorent simultanément à mesure que la production de fibroblastes diminue. Il est bien connu que l'industrie de la cosmétologie utilise des injections de fibroblastes pour améliorer la peau. Mais ce ne sont que des mesures temporaires et sont aussi des invasions sur le corps qui ne sont pas toujours particulièrement saines.

Nettoyage du foie

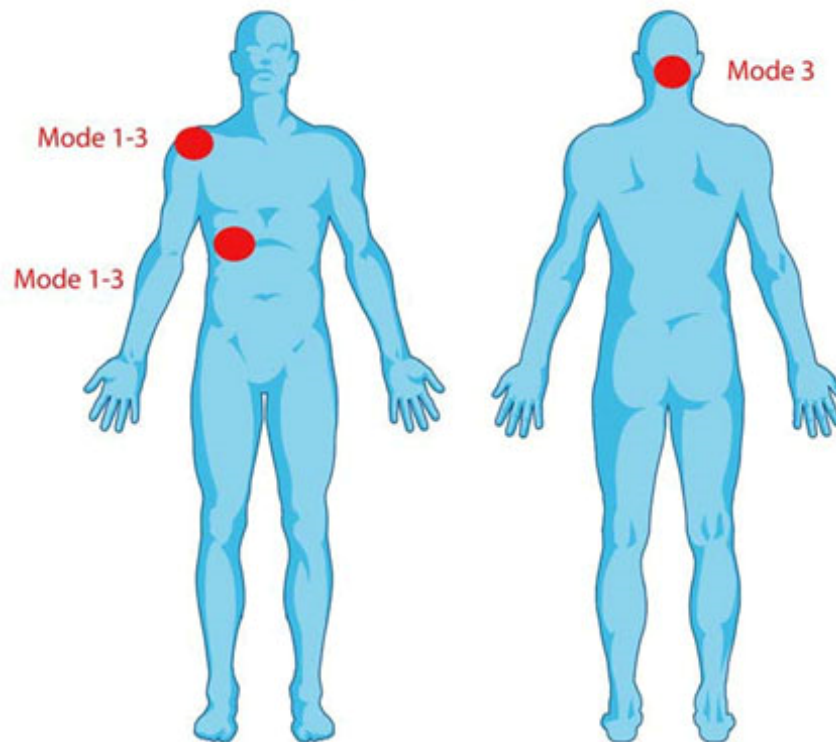



Une fois par jour pendant 7 jours

Nettoyage des reins

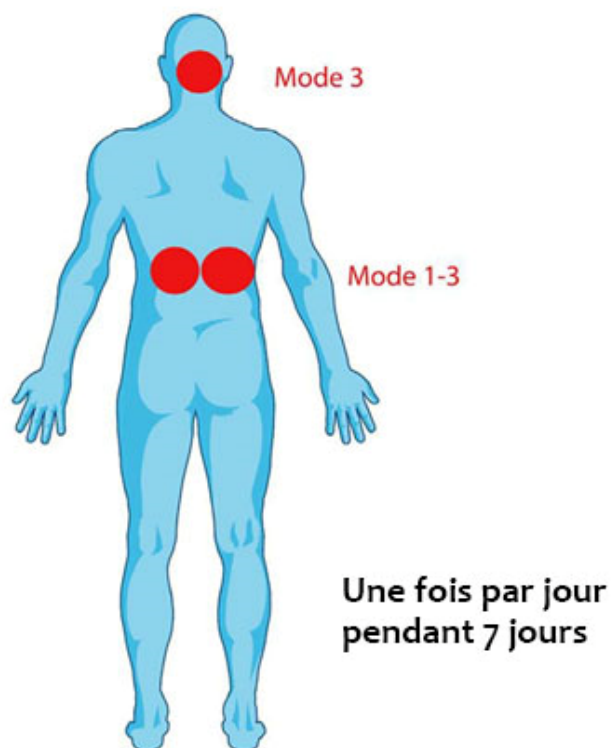

Nettoyage du système lymphatique

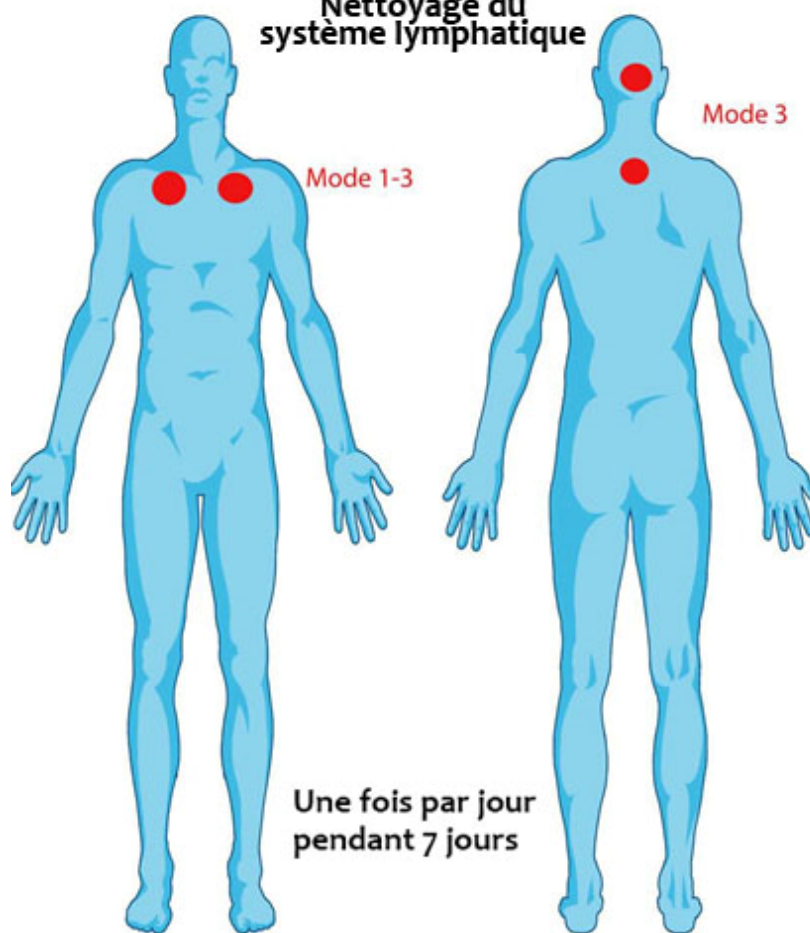

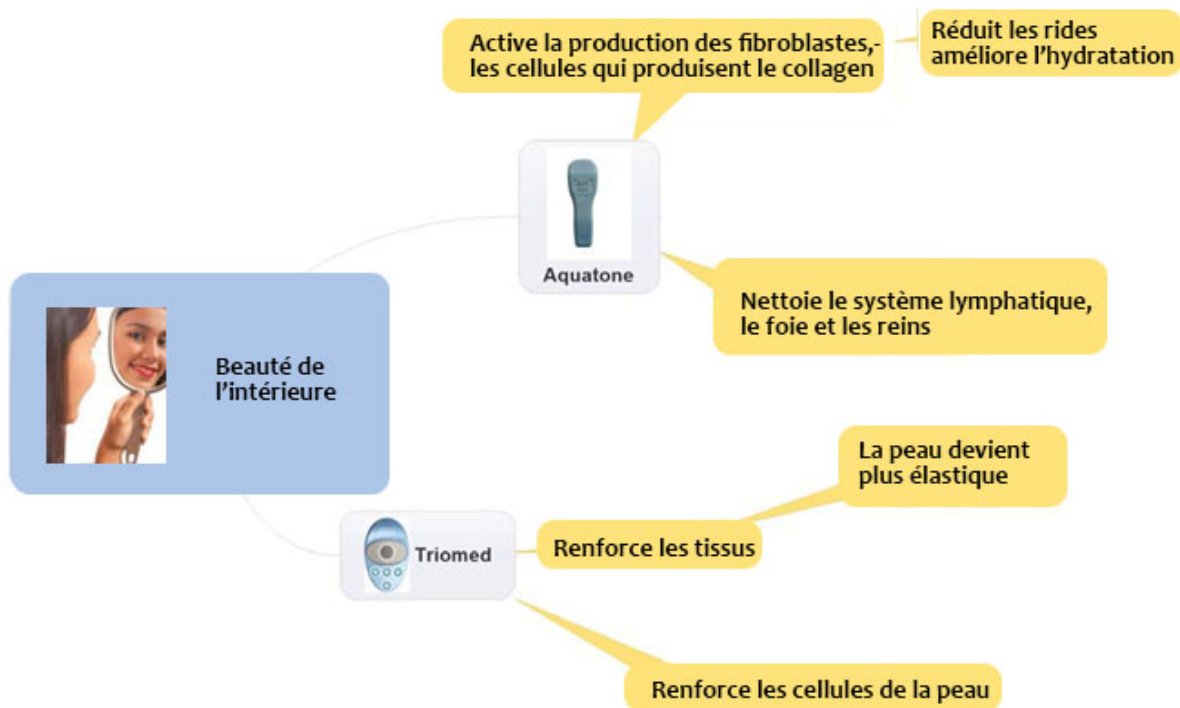

Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'augmenter la production de fibroblastes tout à fait naturellement tout en réduisant considérablement les stagnations et en améliorant les mécanismes de détoxification de l'organisme.

Grâce au dernier développement de la médecine de l'information et à une nouvelle méthode révolutionnaire - l'Aquatone

- nous sommes maintenant en mesure de rajeunir la peau en renforçant l'environnement interne du corps. Les effets positifs de l'Aquatone ont été scientifiquement prouvés dans plus de 150 études cliniques, parmi lesquelles une étude du Karolinska Institute en Suède, qui indique une augmentation significative des fibroblastes lors de l'utilisation de l'Aquatone. De plus, les ondes de l'Aquatone réduisent la stagnation de la lymphe et améliorent les fonctions rénales et hépatiques, ce qui a également un impact majeur sur la peau.

Le Triomed, qui améliore les membranes cellulaires, renforce les cellules de la peau afin qu'ils puissent mieux absorber les nutriments, les crèmes et les lotions.



**Retrouvez
l'Aquatone et le Triomed
sur Xede Store
xedestore.com**

**XEDE
STORE**